

DATAMARS
LivestockTM

Catálogo de Productos

• Inyectores • Oral drenchers • Aplicadores Tópicos • Accesorios • Kits •



njphillipsTM
DATAMARS

SimcroTM
DATAMARS

UNA REPUTACIÓN DE PRECISIÓN Y EXPERIENCIA DE USUARIO

Más de 80 años de experiencia al servicio de la industria de los sistemas de administración de productos zoonosanitarios y envases especiales.

Las soluciones Simcro™ y NJ Phillips™ se basan en colaboraciones sólidas, innovación genuina y una capacidad de entrega de confianza. Con una larga historia en el desarrollo de productos para la administración de fármacos, nuestra atención se centra en el futuro.

En los últimos tiempos, los avances farmacológicos se han vuelto cada vez más complejos. Exigen una mayor precisión en el dispositivo de administración y equipos de envasado y dispensación innovadores, protectores y fáciles de usar.

Las marcas Simcro y NJ Phillips han demostrado su capacidad en la investigación, desarrollo y fabricación de las tecnologías de administración más innovadoras del mundo.

También sabemos que hay que tener en cuenta algo más que la simple administración de una dosis infaliblemente precisa. El bienestar de los animales, la seguridad de los operarios, la eficacia del tratamiento y la experiencia del usuario son las señas de identidad de nuestros productos.



INYECTORES CON PROTECTOR	1
INYECTORES REPETIDORES	3
INYECTORES SELECCIÓN DE DOSIS	4
INYECTORES ALIMENTADOS TUBO	5
INYECTORES ALIMENTADOS BOTELLA	7
DISPOSITIVOS MULTIFUNCIÓN	9
APLICADORES ORALES	10
APLICADORES TÓPICOS	12
ACCESORIOS	13
KITS DE PIEZAS DE REPUESTO	15
TIPOS DE SELECCIÓN DE DOSIS	19

Sekurus™ Inyector con protector



El inyector Sekurus es el resultado de un exhaustivo proceso de desarrollo de varios años que incluyó extensas pruebas de campo en varios países. Las tecnologías patentadas incluyen un mecanismo de activación en dos etapas y un protector de aguja de cierre automático.

MECANISMO DE SEGURIDAD PATENTADO DE DOS ETAPAS

El mecanismo patentado de dos etapas está específicamente diseñado para una penetración precisa y una colocación uniforme de la dosis, ya sea subcutánea profunda o intramuscular.

PROTECTOR DE AGUJA PATENTADO

El protector de la aguja minimiza el riesgo de lesiones relacionadas con el pinchazo de la aguja y permite al operario retrasar la penetración de la aguja hasta que haya cesado cualquier movimiento del animal.


INYECCIÓN SUBCUTÁNEA O INTRAMUSCULAR CON UNA SOLA MANO

La administración de una inyección con una sola mano es mucho más fácil y menos peligrosa para el operario que las técnicas a dos manos, especialmente en espacios reducidos como una manga de ganado. Sekurus se ha desarrollado para garantizar la colocación precisa del fármaco subcutáneo o intramuscular con una sola mano. Esto permite al usuario mantener una distancia más segura del animal.



Protector de aguja perpendicular

LA LONGITUD DE LA AGUJA DECIDIRÁ SI LA INYECCIÓN ES INTRAMUSCULAR O SUBCUTÁNEA

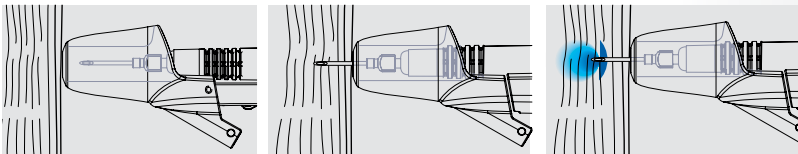

La aguja permanece protegida hasta que se activa el gatillo.
La dosis no se administra hasta que se alcanza la penetración completa de la aguja.
La dosis se administra a la longitud de aguja deseada.

TAMAÑO BOTELLA	TIPO DE MONTAJE	RANGO DE DOSIS	INCREMENTO DE DOSIS	TIPO DOSIS (VER PÁGINA 19)	CONTENIDO KIT	REFERENCIA KIT
2 mL	Botella	0.1 - 2 mL	0.1 mL	20 Tope de dosis seleccionable	1x Dispositivo con protector de aguja perpendicular y Cubierta para montaje en botella de 100 ml, 1 collarín de 30 mm, 3 juntas tóricas, 1x Aguja Detectable 16G x ¾ Aguja Detectable D3, 1x Aguja Cubierta 16G x 1/2", 1x Herramienta de extracción de agujas	Recambios: 1 Accesorios: 2, 13



Accurus Inyector con protector



Nuestra gama de inyectores con protector es el resultado de un exhaustivo proceso de desarrollo que ha durado varios años y que ha incluido extensas pruebas de campo en varios países.


INYECCIÓN SUBCUTÁNEA CON UNA MANO

La administración de una inyección subcutánea con una sola mano es mucho más fácil y menos peligrosa para el operario que las técnicas a dos manos, especialmente en espacios reducidos como una manga de ganado.

Accurus se desarrolló para garantizar la colocación precisa del fármaco subcutáneo con una sola mano. Esto permite al usuario mantener una distancia más segura del animal.


PROTECTOR DE AGUJA PATENTADO

El protector de la aguja minimiza el riesgo de lesiones relacionadas con el pinchazo de la aguja. El protector de la aguja permite al operador retrasar la penetración de la aguja hasta que haya cesado cualquier movimiento del animal.

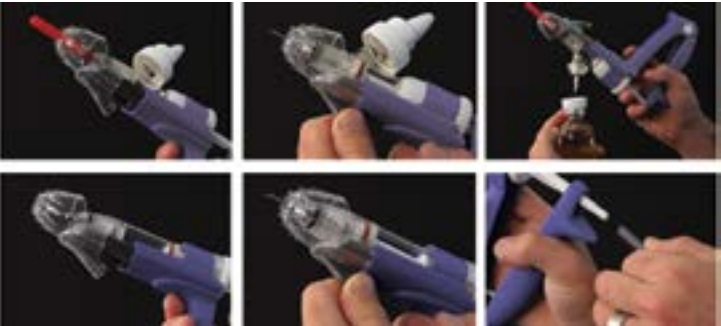

Protector de aguja de autosujeción

INYECCIÓN SUBCUTÁNEA

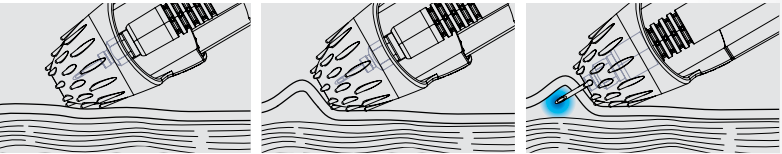

El protector de aguja con púas se agarra a la piel del animal.
La dosis se administra en el lugar subcutáneo correcto.

TAMAÑO BOTELLA	TIPO DE MONTAJE	RANGO DE DOSIS	INCREMENTO DE DOSIS	TIPO DE DOSIS (PÁGINA 19)	CONTENIDO KIT	KIT REF
5 mL	Tubo	0.5 mL - 5 mL	0.5 mL	10 Tope de dosis seleccionable hacia delante	1x Dispositivo con protector de aguja autosujeción, 1x 4.7x1220mm Feed-Tube, 3x Draw-Offs (Small, Medium, Large), 3x O-Rings, 2x Cubierto 16G x ½" Aguja, 1x Herramienta de extracción de agujas,	Recambios: 2 Accesorios: 1, 13
6 mL	Botella	1 mL - 6 mL	n/a	Tope de dosis variable	1x Dispositivo con protector de aguja autosujeción y Cubierta de botella de 100 ml, 2x collares de montaje de botella (20mm, 30mm) 3x juntas tóricas, 2x cubiertas 16G x ½" 1x Herramienta de extracción de agujas	Recambios: 3 Accesorios: 2, 13
12 mL	Tubo	2.5 - 12 mL	0.5 mL	20 Tope de dosis variable	1x Dispositivo con protector de aguja autosujeción, 1x 4.7x1220mm Feed-Tube, 3x Extractores (Pequeño, Mediano, Grande), 3x juntas tóricas, 3x arandelas de fieltro de repuesto, 2x Aguja Cubiertas 16G x ½" Aguja, 1x Herramienta de extracción de agujas	Recambios 4 Accesorios: 1, 13

Ezi-Grip Inyector Repetidor



- Muy duradero fabricado con materiales de alta calidad.
- El inyector se llena a través de la punta.
- Fácil de limpiar y mantener.
- Barril de polisulfona para mayor durabilidad.
- Selección de dosis sencilla y precisa con control de volumen de fácil agarre.
- Mango metálico ergonómico y robusto que soporta el uso durante largos periodos y reduce la fatiga de la mano.



TAMAÑO BOTELLA	TIPO DE MONTAJE	RANGO DE DOSIS	INCREMENTO DE DOSIS	TIPO BARRIL	CONTENIDO KIT	KIT REF
25 mL	Draw-Up	0.5 - 2.5 mL	0.5 mL	Polisulfona	1x Dispositivo con Barril de Polisulfona, 1x Llave Cubo de Aguja, 3x Juntas tóricas pistón, 1x Lubricante	Recambios: 5, 7, 8 Accesorios: 4, 13
50 mL	Draw-Up	1 - 5 mL	1 mL	Polisulfona	1x Dispositivo con Barril de Polisulfona, 1x Llave de Cubo de Aguja, 3x Juntas tóricas del pistón, 1x Lubricante	Recambios: 6, 9, 10 Accesorios: 4, 13

Pistol Grip Inyector Repetidor



- Selección de dosis sencilla y precisa con control de volumen de fácil agarre.
- El inyector se llena a través de la punta.
- Fácil de limpiar y mantener.
- El cargador de agujas incorporado le ahorra tiempo.
- Diseño ergonómico con empuñadura de pistola que reduce el esfuerzo de la mano.
- Viene con un cilindro de polipropileno compatible con una amplia gama de productos.
- También se adapta a barriles de polisulfona. Pueden adquirirse por separado (kits 8 y 10, página 15).



TAMAÑO BOTELLA	TIPO DE MONTAJE	RANGO DE DOSIS	INCREMENTO DE DOSIS	TIPO DE BARRIL	CONTENIDO KIT	KIT REF
25 mL	Draw-Up	0.5 - 2.5 mL	0.5 mL	Polipropileno	1x Dispositivo con barril de polipropileno, 1x Llave de cubo de aguja, 3x Juntas tóricas, 1x Lubricante	Recambios: 5, 7, 8 Accesorios: 4, 13
50 mL	Draw-Up	1 - 5 mL	1 mL	Polipropileno	1x Dispositivo con barril de polipropileno, 1x Llave de cubo de aguja, 3x Juntas tóricas, 1x Lubricante	Recambios: 6, 9, 10 Accesorios: 4, 13



Premium Inyector selección de dosis



Para que un tratamiento zoonosanitario sea eficaz debe administrarse a la dosis correcta. Los Inyectores con selección de dosis hacia delante de Simcro proporcionan al usuario una precisión de dosis sencilla y fiable incluso en volúmenes de dosis bajos, garantizando la confianza y la eficacia en todos los ajustes de dosis.

REDUCE LA FATIGA

La distancia se reduce a medida que disminuye el volumen de la dosis, lo que proporciona una mejor respuesta y comodidad al usuario cuando se administra la dosis.

SELECCIÓN DE DOSIS

La configuración mejorada de la válvula del inyector garantiza un cebado preciso y la administración de la dosis en cualquier selección de dosis elegida.



AVANCE SELECCIONABLE - Las ventajas de un barrido completo

EL Inyector Premium utiliza una carrera positiva, que desplaza todo el contenido del barril en cualquier ajuste de dosis. Esto crea una sensación positiva para los usuarios y garantiza que cada dosis se administre en su totalidad para asegurar la precisión de la dosis y la máxima eficacia del fármaco.



La clave de la eficacia es la precisión. A dosis bajas, el émbolo de un inyector de selección inversa sigue actuando sobre un barril lleno de producto.

Esto hace que el aire en el sistema sea difícil de purgar, ya que las burbujas de aire se comprimen en lugar de ser expulsadas fuera del barril. Si estas burbujas pasan desapercibidas, pueden dar lugar a la administración de múltiples dosis insuficientes. La configuración seleccionable hacia delante del inyector reduce la posibilidad de burbujas en el sistema y facilita su eliminación, garantizando la precisión de la dosis y la eficacia del tratamiento.

TAMAÑO BOTELLA	TIPO DE MONTAJE	RANGO DE DOSIS	INCREMENTO DE DOSIS	TIPO DE DOSIS (PÁGINA 19)	CONTENIDO KIT	KIT REF
0.5 mL	Botella	0.05 - 0.5 mL	0.05 mL	10 topes de dosis seleccionables hacia delante	1x Dispositivo + cubierta para botella de 100 mL, 3x juntas tóricas, 2x Cubierto 18G x 1/2" Aguja	Recambios: 18 Accesorios: 2, 3, 13
2 mL	Botella	0.1 - 2 mL	0.1 mL	20 topes de dosis seleccionables hacia delante	1x Dispositivo con Cubierta de Montaje de Botella de 100 mL, 2x Collares de Montaje de Botella (20mm, 30mm), 3x juntas tóricas, 2x agujas Aguja 16G x 1/2"	Recambios: 19 Accesorios: 2, 3, 13
5 mL	Tubo	0.5 - 5 mL	0.5 mL	10 topes de dosis seleccionables hacia delante	1x Dispositivo, 1x Tubo de Alimentación 4.7x1220mm, 3x Extracciones (Pequeña, Mediana, Grande), 3x O-Rings, 2x Aguja 16G x 1/2"	Spare Parts: 15 Accessories: 1, 3, 13

TAMBIÉN DISPONIBLE - Inyector Accurus de 5 ml de alimentación por tubo seleccionable hacia delante (Página 2)

Inyector automático de metal para aves



ALTA DURABILIDAD

Fabricado con materiales metálicos de alta calidad.

AVICULTURA

Diseñado específicamente para aves de corral con un tubo estándar y una lanza para botella y tubo de alimentación que permite inyectar más a distancia.

AJUSTE DE DOSIS VARIABLE

Permite una dosificación fácil y flexible.

DISEÑO ERGONÓMICO

El diseño de la empuñadura para los dedos facilita su uso durante periodos prolongados y reduce la fatiga de la mano.

FÁCIL DE MANTENER

El paquete de productos incluye un kit de mantenimiento completo.



TAMAÑO BOTELLA	TIPO DE MONTAJE	RANGO DE DOSIS	INCREMENTO DE DOSIS	TIPO DE DOSIS (PÁGINA 19)	CONTENIDO KIT	KIT REF
0.5 mL	Tube Fed	0.1 - 0.5 mL	n/a	Variable Nut Lock Dose Stops	1x Dispositivo de metal, 1x Tubo de alimentación de extracción y lanza de botella, 1x Kit de servicio principal, 1x Llave de cubo de aguja, 1x Tuerca de Aguja, 1x Lubricante	Recambios: 11 Accesorios: 1, 13

Inyector metálico de alimentación por tubo



ALTA DURABILIDAD

Fabricado con materiales de alta calidad.

CONEXIÓN POR TUBO DE ALIMENTACIÓN

La conexión para tubos admite tubos de alimentación de 4,8 mm.

ADMINISTRACIÓN DE DOSIS DE LARGA DURACIÓN

AJUSTE DE DOSIS VARIABLE

Permite una dosificación fácil y flexible con un mecanismo de bloqueo positivo de la dosis.

DISEÑO ERGONÓMICO

El diseño de la empuñadura para los dedos facilita su uso durante periodos prolongados y reduce la fatiga de la mano.



TAMAÑO BOTELLA	TIPO DE MONTAJE	RANGO DE DOSIS	INCREMENTO DE DOSIS	TIPO DE DOSIS (PÁGINA 19)	CONTENIDO KIT	KIT REF
2 mL	Tubo	0.5 - 2 mL	n/a	Tope de dosis de bloqueo de tuerca variable	1x Dispositivo de metal, 1x Tubo de Alimentación 4.8 x 800mm, 1x Llave de cubo de aguja, 1x Tuerca de aguja, 3x Juntas tóricas, 1x Lubricante	Recambios: 12 Accesorios: 1, 13
5 mL	Tubo	0.5 - 5 mL	n/a	Tope de dosis de bloqueo de tuerca variable	1x Dispositivo metálico, 1x Tubo de Alimentación de 4,8 x 800 mm, 1x Llave de cubo de aguja, 1x Tuerca de aguja, 3x Juntas tóricas, 3x Arandelas, 3x Soportes de Arandela, 1x Lubricante	Spare Parts: 13 Accessories: 1, 13

Premium Inyector alimentado por tubo



SELECTOR RÁPIDO DE DOSIS

Selección de dosis sencilla y precisa con control de volumen de fácil agarre.

CONEXIÓN DE ALIMENTACIÓN POR TUBO

La conexión del tubo admite tubos de alimentación de 4,7 mm y 6,4 mm.

AGARRE ERGONÓMICO

El mango está diseñado para la comodidad del operario con un acabado texturizado antideslizante que reduce la fatiga de la mano cuando se utiliza durante largos periodos de tiempo.



12 ML PREMIUM INYECTOR DE ALTA VISCOSIDAD

El inyector Hi-Viscosity está diseñado para administrar con precisión formulaciones problemáticas y viscosas incluso a temperaturas muy frías.

TAMAÑO BOTELLA	TIPO DE MONTAJE	RANGO DE DOSIS	INCREMENTO DE DOSIS	TIPO DE DOSIS (PÁGINA 19)	CONTENIDO KIT	KIT REF
2 mL	Tubo	0.1 - 2 mL	0.1 mL	20 topes de dosis seleccionables	1x Dispositivo, 1x Tubo de Alimentación 4.7x1220mm, 3x Extracciones (Pequeña, Mediana, Grande), 3x O-Rings, 2x Agujas cubiertas 16G x 1/2".	Recambios: 14 Accesorios: 1, 3, 13
5 mL	Tubo	0.5 - 5 mL	0.5 mL	10 topes de dosis seleccionables hacia delante	1x Dispositivo, 1x Tubo de Alimentación 4.7x1220mm, 3x Extracciones (Pequeña, Mediana, Grande), 3x O-Rings, 2x Agujas cubiertas 16G x 1/2".	Recambios: 15 Accesorios: 1, 3, 13
12 mL	Tubo	2.5 - 12 mL	0.5 mL	20 topes de dosis seleccionables	1x Dispositivo, 1x Tubo de Alimentación de 6,4 x 1500 mm, 3x Extractores de Alto Flujo (Pequeño, Mediano, Grande), 3x juntas tóricas, 3x arandelas de fieltro, 2x Agujas cubiertas 16G x 1/2".	Recambios: 16 Accesorios: 1, 3, 13

Compact Inyector alimentado por tubo



- Diseño probado, fiable y duradero.
- Selección variable y flexible de la dosis.



TAMAÑO BOTELLA	TIPO DE MONTAJE	RANGO DE DOSIS	INCREMENTO DE DOSIS	TIPO DE DOSIS (PÁGINA 19)	CONTENIDO KIT	KIT REF
2 mL	Tubo	0.2 - 2 mL	n/a	Topes de dosis variables	1x Dispositivo, 1x Tubo de Alimentación 4.7 x 1220mm, 3x Extractores Ventilados (Pequeño, Mediano, Grande), 3x O-Rings, 2x Agujas cubiertas 16G x 1/2".	Recambios: n/a Accesorios: 1, 3, 13
5 mL	Tubo	0.5 - 5 mL	n/a	Topes de dosis variables	1x Dispositivo, 1x Tubo de Alimentación 4.7 x 1220mm, 3x Extractores Ventilados (Pequeño, Mediano, Grande), 3x O-Rings, 2x Agujas cubiertas 16G x 1/2".	Recambios: n/a Accesorios: 1, 3, 13

inyector automático metálico para montaje en botella

CUBIERTA DE BOTELLA LLENA

El protector de botella de 100 ml proporciona mayor estabilidad a la botella de producto. Los kits también incluyen adaptadores para botellas pequeñas, medianas y grandes.

ALTA DURABILIDAD

Fabricado con materiales de alta calidad.

AJUSTE DE DOSIS VARIABLE

Permite una dosificación fácil y flexible con un mecanismo de bloqueo positivo de la dosis.

DISEÑO ERGONÓMICO

El diseño de la empuñadura para los dedos facilita su uso durante periodos prolongados y reduce la fatiga de la mano.

ADMINISTRACIÓN DE DOSIS DE ALTA PRECISIÓN

TAMAÑO BOTELLA	TIPO DE MONTAJE	RANGO DE DOSIS	INCREMENTO DE DOSIS	TIPO DE DOSIS (PÁGINA 19)	CONTENIDO KIT	KIT REF
2 mL	Botella	0.1 - 2 mL	n/a	Tope de dosis de bloqueo de tuerca variable	1x Dispositivo Metálico con Cubierta de Montaje de Botella de 100 mL, 3x Tapones de Montaje de Botella (20mm, 30mm, 33mm), 1x llave de cubo de aguja, 1x tuerca de aguja, 3x juntas tóricas, 1x lubricante	Recambios: 12 Accesorios: 3, 13
5 mL	Botella	0.5 - 5 mL	n/a	Tope de dosis de bloqueo de tuerca variable	1x Dispositivo Metálico con Cubierta de Montaje de Botella de 100 mL, 3x Tapones de Montaje de Botella (20mm, 30mm, 33mm), 1x llave de cubo de aguja, 1x tuerca de aguja, 3x juntas tóricas, 1x lubricante	Recambios: 17 Accesorios: 3, 13



Premium inyector alimentado por botella

SELECCIÓN DE DOSIS SIMPLE Y PRECISA

Garantiza un cebado y una administración de dosis precisos.

DOSIS VARIABLE

Permite una dosificación fácil y flexible..

DISEÑO ERGONÓMICO

Proporciona un agarre cómodo, una respuesta táctil y reduce la fatiga durante largos periodos de tiempo.

BOTELLA AJUSTABLE

Permite orientar el ángulo de la botella para todos los estilos de dosificación del operario, especialmente en espacios reducidos como los conductos de ganado.

TAMAÑO BOTELLA	TIPO DE MONTAJE	RANGO DE DOSIS	INCREMENTO DE DOSIS	TIPO DE DOSIS (PÁGINA 19)	CONTENIDO KIT	KIT REF
0.5 mL	Botella	0.05 - 0.5 mL	0.05 mL	10 topes de dosis seleccionables hacia delante	1x Dispositivo con cubierta para montaje en botella de 100 mL, 3x juntas tóricas, 2x Cubierto 18G x 1/2" Aguja	Recambios: 18 Accesorios: 2, 3, 13
2 mL	Botella	0.1 - 2 mL	0.1 mL	20 topes de dosis seleccionables hacia delante	1x Dispositivo con Cubierta de Montaje de Botella de 100 mL, 2x Collares de Montaje de Botella (20mm, 30mm), 3x juntas tóricas, 2x agujas Aguja 16G x 1/2	Recambios: 19 Accesorios: 2, 3, 13
6 mL	Botella	0.5 - 6 mL	n/a	Tope de dosis variable	1x Dispositivo con Cubierta de Montaje de Botella de 100 mL, 2x Collares de Montaje de Botella (20mm, 30mm), 3x juntas tóricas, 2x agujas Aguja 16G x 1/2	Recambios: 20 Accesorios: 2, 3, 13



POSICIÓN DE LA BOTELLA AJUSTABLE

Las botellas de los inyectores Simcro pueden girarse antes de su uso aflojando la banda de la botella. Esto permite bloquear la botella en una posición diferente que puede ser más cómoda y conveniente.



Ultimate BMV™ inyector alimentado por botella

- Suministra con precisión todos los volúmenes de dosis con un selector de dosis fácil de usar.
- Mango texturizado para un mayor agarre, para mayor comodidad y control.
- Adecuado para frascos y envases de vacunas pequeños sin necesidad de conectar tubos.
- El soporte de la botella se puede girar 360° para garantizar que la botella permanezca en posición de cebado vertical.
- Se desmonta fácilmente para su limpieza y relubricación.
- Los adaptadores para frascos Ultimate BMV de 30 mm y 33 mm se venden por separado.



TAMAÑO BOTELLA	TIPO MONTAJE	RANGO DE DOSIS	INCREMENTO DE DOSIS	TIPO DE DOSIS	CONTENIDO KIT	KIT REF
2 mL	Botella	0.2 - 2 mL	0.2 mL	Tope de dosis variable	1x dispositivo	Recambios: 21 Accesorios: 5, 6, 13
6 mL	Botella	0.5 - 6 mL	0.5 mL	Tope de dosis variable	1x dispositivo	Recambios: 22 Accesorios: 5, 6, 13

BMV™ inyector alimentado por botella

- Diseño compacto y fiable.
- Fácil montaje y desmontaje de las agujas.
- Posibilidad de ajustar la posición del cañón.



TAMAÑO BOTELLA	TIPO MONTAJE	RANGO DE DOSIS	INCREMENTO DE DOSIS	TIPO DE DOSIS (PÁGINA 19)	CONTENIDO KIT	KIT REF
0.5 mL	Botella	0.1 - 0.5 mL	n/a	Tope de dosis variable	1x Dispositivo	Recambios 23 Accesorios: 7, 8, 13
2 mL	Botella	0.2 - 2 mL	n/a	Tope de dosis variable	1x Dispositivo	Recambios: n/a Accesorios: 7, 8, 13



OPTIMISER™ Multi Kit



Diseñado para ofrecer una solución integral

PRODUCTO TODO EN UNO

El kit de productos incluye accesorios para que el ganadero pueda tratar por vía oral parenteral o tópica.

COMODIDAD DEL OPERADOR

Diseñado para la comodidad del operador, el Optimiser ha demostrado su fiabilidad y durabilidad.

PRECISIÓN

Proporciona volúmenes de dosis precisos con un selector de dosis fácil de usar.



TAMAÑO BOTELLA	TIPO DE MONTAJE	RANGO DE DOSIS	INCREMENTO DE DOSIS	TIPO DE DOSIS (PÁGINA 19)	CONTENIDO KIT	KIT REF
15 mL	Tubo	1 mL - 15 mL	Los incrementos de dosis varían: Incrementos de 0,5 mL de 1 - 10 mL Incrementos de 1 ml de 10 a 15 ml	24 topes de dosis seleccionables	1x Dispositivo, 1x Tubo de Alimentación 6.4x1500mm, 3x Extractores (Pequeño, Mediano, Grande), 3x Juntas tóricas, 3x Arandelas de fieltro, 2x Cubierto 16G x ½" Aguja, 1x 15mL Drench Barril, 1 boquilla de mojado oral metálica de 86 mm, 1 boquilla recta de plástico de 57 mm, 1 boquilla de vertido con barra en T	Recambios: 24 Accesorios: 3, 10, 11, 13

Oral & Pour-On Apicador



Dispositivo multiuso diseñado para la aplicación tópica y oral de productos

DISEÑO ERGONÓMICO

Proporciona un agarre cómodo, una respuesta táctil y reduce la fatiga durante largos periodos de tiempo.

OPCIONES DE DOSIS VARIABLE

Garantiza un cebado preciso y la administración de la dosis en cualquier selección de dosis

TUBO DE ALIMENTACIÓN

El tubo de alimentación incluido en el kit del dispositivo de 30 mL es altamente compatible químicamente con una gama de productos zoonosanitarios.



TAMAÑO BOTELLA	TIPO DE MONTAJE	RANGO DE DOSIS	INCREMENTO DE DOSIS	TIPO DE DOSIS (PÁGINA 19)	CONTENIDO KIT	KIT REF
20 mL	Tubo	1 - 20 mL	n/a	Tope de dosis variable	1x Dispositivo con Boquilla Oral Metálica de 100 mm, 1 Boquilla Vertedora de 63 mm, 1 Boquilla Vertedora con Barra en T, 3x Juntas tóricas, 3x Arandelas de fieltro, 1x Tubo de alimentación de 6,4 x 1500 mm, 2 muelles antitorsión	Recambios: 25 Accessories: 9, 10, 11, 13
30 mL	Tubo	4 - 30 mL	n/a	Tope de dosis variable	1x Dispositivo con Boquilla Oral Metálica de 100 mm, 1 Boquilla Vertedora de 63 mm, 1x Boquilla Fan-Spray, 1x Tubo de alimentación de 6,4 x 1200 mm, 2 muelles antitorsión, 3 juntas tóricas, 3 arandelas de fieltro	Spare Parts: 26 Accessories: 9, 10, 11, 13

Ultimate BMV™ Aplicador Oral



Drencher específico para impregnar cerdos

DISEÑO PROBADO, FIABLE Y DURADERO

CUELLOS DE BOTELLA

Cuello de botella de 24 mm y 28 mm incluido en el kit del producto para acomodar botellas de productos farmacéuticos de diferentes tamaños.

SELECTOR DE DOSIS FÁCIL DE USAR

MANGO DISEÑADO CON ACABADO TEXTURIZADO

ANTIDESLIZANTE

Para un mayor agarre.



TAMAÑO DE BOTELLA	TIPO DE MONTAJE	RANGO DE DOSIS	INCREMENTO DE DOSIS	TIPO DE DOSIS	CONTENIDO KIT	KIT REF
2 mL	Botella	0.2 - 2 mL	0.2, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 2.0 mL	12 topes de dosis seleccionables	1x dispositivo con boquilla recta de 57 mm, 1x collarín de montaje en botella de 24 mm, 1x collarín de montaje en botella de 28 mm, 3x juntas tóricas	Recambios: n/a Accesorios: 1, 13

High Flow Aplicador Oral



ECONÓMICO Y COMPATIBLE

Un aplicador económico y duradero para la mayoría de las aplicaciones orales.

COMODIDAD DEL OPERADOR

Diseñada para la comodidad del operario con un mango y una palanca ligeros y ergonómicos.

PRECISIÓN

Proporciona volúmenes de dosis fiables y precisos con un selector de dosis fácil de usar.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

El clip de sujeción permite un fácil acceso para la limpieza y el mantenimiento.

Comodidad para el operario gracias al mango y la palanca ergonómicos.

RECARGA RÁPIDA

La válvula de alto caudal permite tiempos de recarga más rápidos.



TAMAÑO DE BOTELLA	TIPO DE MONTAJE	RANGO DE DOSIS	INCREMENTO DE DOSIS	TIPOS DE DOSIS	CONTENIDO KIT	KIT REF
25 mL	Tubo	1 - 25 mL	n/a	Topes de dosis variable	1x Dispositivo con boquilla metálica, 1x Tubo de alimentación	Recambios: n/a Accessories: 10, 11, 13



20 mL Metal Aplicador Oral



Aplicador popular entre ganaderos de vacuno y ovino.

ALTA DURABILIDAD

Aplicador metálico de alta calidad.

AJUSTE DE DOSIS VARIABLE

Permite una dosificación fácil y flexible.

DISEÑO ERGONÓMICO

Proporciona un agarre cómodo, una respuesta táctil y reduce la fatiga durante largos periodos de tiempo.

RESISTENTE A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS

Cilindro de alta resistencia química con graduaciones moldeadas.



TAMBIÉN DISPONIBLE: 20 mL Aplicador + 2.5 Litros Mochila

TAMAÑO BOTELLA	TIPO DE MONTAJE	RANGO DE DOSIS	INCREMENTO DE DOSIS	TIPOS DE DOSIS (PÁGINA 19)	CONTENIDO KIT	KIT REF
20 mL	Tubo	1 - 20 mL	n/a	Tope de dosis variable	1x Dispositivo metálico con boquilla metálica de 110 mm, 1x Tubo de alimentación de 9,6 x 1500 mm, 2x Muelles de tubo de alimentación, 1x Kit adaptador de tubo de alimentación, 3x Juntas tóricas, 3x Arandelas, 1x Lubricante	Recambios: 28, 29 Accesorios: 10, 11, 12, 13

8 mL Metal Cordero Aplicador Oral



ALTA DURABILIDAD

Construcción metálica robusta de gran durabilidad.

AJUSTE DE DOSIS VARIABLE

Permite una dosificación fácil y flexible.

DISEÑO ERGONÓMICO

Proporciona un agarre cómodo, una respuesta táctil y reduce la fatiga durante largos periodos de tiempo.

RESISTENTE A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS

Cilindro de alta resistencia química con graduaciones moldeadas.



Pequeña boquilla “gruesa” diseñada específicamente para corderos.

TAMAÑO BOTELLA	TIPO DE MONTAJE	RANGO DE DOSIS	INCREMENTO DE DOSIS	TIPO DE DOSIS (PÁGINA 19)	CONTENIDO KIT	KIT REF
8 mL	Tubo	0.5 - 8 mL	n/a	Topes de dosis variable	1x Dispositivo metálico con boquilla metálica de 80 mm, 1x Tubo de alimentación de 9,6 x 1500 mm, 2x Resortes del tubo de alimentación, 6x Juntas tóricas, 6x Arandelas, 1x Lubricante	Recambios: 27 Accesorios: 10, 11, 12, 13

60 mL Metal Aplicador Oral



ALTA DURABILIDAD

Fabricado con materiales de alta calidad.

AJUSTE DE DOSIS VARIABLE

Permite una dosificación más fácil y flexible.

DISEÑO ERGONÓMICO

Proporciona un agarre cómodo, una respuesta táctil y reduce la fatiga durante largos periodos de tiempo.



TAMAÑO BOTELLA	TIPO DE MONTAJE	RANGO DE DOSIS	INDREMENTO E DOSIS	TIPO DE DOSIS (PÁGINA 19)	CONTENIDO KIT	KIT REF
60 mL	Tubo	5 - 60 mL	n/a	Topes de dosis variable	1x Dispositivo Metálico con Boquilla Metálica de 150 mm, 1x Tubo de Alimentación de 9,6 x 1500 mm, 2x Muelles de Tubo de Alimentación, 1x Kit Adaptador de Tubo de Alimentación, 3x Juntas tóricas, 3x Arandelas de repuesto, 1x Lubricante	Recambios: 30 Accesorios: 10, 11, 13

Magnum Aplicador Tópico



Administración precisa y suave de productos orales y en formato de aplicación tópica.

BOQUILLA EN ÁNGULO

Para una mejor visibilidad en la aplicación.

RECARGA RÁPIDA

Con tecnología SoftLock, que reduce el chorro posterior al parto.

SISTEMA DE EXTRACCIÓN FÁCIL DEL CAÑÓN

Para limpiar y lubricar.



TAMAÑO BOTELLA	TIPO DE MONTAJE	RANGO DE DOSIS	INCREMENTO DE DOSIS	DOSE TYPE	KIT CONTENTS	KIT REF
70 mL	Tubo	10 - 70 mL	2.5 mL Incremento de dosis	24 Topes de dosis seleccionables	1x Dispositivo, 1x Boquilla de ducha, 1x Tubo de alimentación de 9,5 x 1250 mm, 2 muelles antitorsión, 3x juntas tóricas, 3x arandelas de fieltro	Recambios: n/a Accesorios: 10, 11, 13



Accesorios



Kit de accesorios de extracción de inyectores

Contenido Kit: 1x Tubo de alimentación de 4,7 x 1220mm, 1x Tubo de alimentación de 6,4 x 1200mm, 3x Extractores (Pequeño, Mediano, Grande)


Compatible con: Todos los inyectores Simcro y NJ Phillips Tube Fed.



Accesorio inyector Handi-ject

Contenido Kit: 1x Handi-Ject (tubo de 1000 mm)

Compatiblecon: Todos los inyectores Simcro y NJ Phillips Tube Fed.

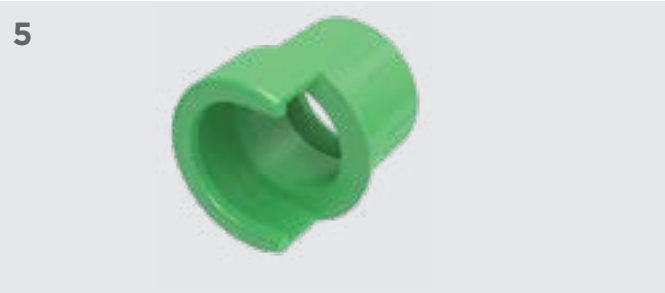

Tapa Ultimate BMV™ 30 mm

Contenido Kit: 1x UBMV 30 mm Capuchón

Compatible con: Inyectores de montaje en botella Ultimate BMV™ de 2 mL y 6 mL (página 8).



Tapa BMV™ 33 mm

Contenido Kit: 1x BMV™ 33 mm Tapa

Compatible con: Inyectores de 0,5 mL y 2 mL BMV™ para montaje en botella (Página 8).



Bottle Mount Injector Attachment Kit

Kit Contents: 1x 20mm Bottle Collar, 1x 30mm Bottle Collar, 1x 100 mL Bottle Shroud


Compatible with: All Simcro Bottle Mount Injectors.



Repeater Coloured Knobs

Kit Contents: 4x Coloured knobs (yellow, red, blue, orange)

Compatible with: Pistol Grip and Ezi-Grip Repeaters (Page 3).

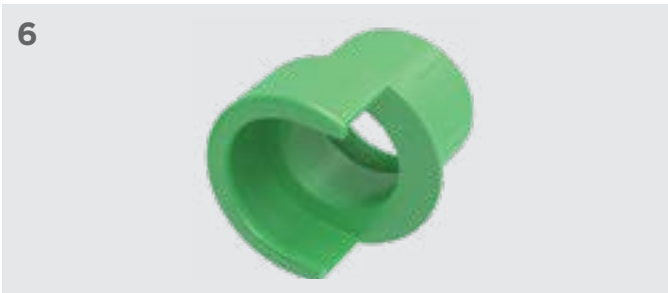

Tapa Ultimate BMV™ 33 mm

Contenido Kit: 1x UBMV 33 mm Capuchón

Compatible con: Inyectores de montaje en botella Ultimate BMV™ de 2 mL y 6 mL (página 8).



BMV™ Cubierta para botellas de 100 ml

Contenido Kit: 1x BMV™ 100 mL Cubierta para botellas

Compatible con: Inyectores de 0,5 mL y 2 mL BMV™ para montaje en botella (Página 8).



Accesorio aplicador de gancho flotante

Contenido Kit: 1x Boquilla con gancho de 714 mm, 1x Tubo de alimentación de 9,5 x 1500 mm, 1x Adaptador, 2x Muelles antitorsión

Compatible con: Aplicadores Simcro de 15 - 30 ml (Página 9).



Mochila rígida de 2,5 L

Contenido Kit: 1x Mochila rígida de 2,5 L, 1x Tapa de extracción de aire, 1x Tapa de viaje negra, 2x Correas

Compatible con: Todos los Aplicadores (Páginas 9-12).



Lubricante para aplicadores e inyectores

Contenido Kit: 2 botellas de lubricante.


Compatible with: Todos los Aplicadores e inyectores.



Mochila Flexipack 5 L

Contenido Kit: 1x Mochila flexible de 5 L, 1x Tapa de cierre de 38 mm, 1x Tapa de doble espiga de 38 mm, 1x Tubo dispensador de PVC, 1x Correa de mochila

Compatible con: Todos los Aplicadores (Páginas 9-12).

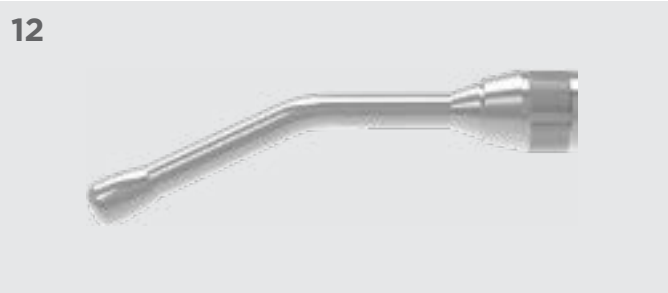

Boquilla para ovejas

Contenido Kit: 1x Boquilla de oveja de 90mm, 1x Tuerca, 1x Anillo de sellado.

Compatible con: Empapador bucal metálico de 20 ml y empapador bucal metálico de 8 ml (página 11).

INYECTORES CON PROTECCIÓN



SOPORTE PARA BOTELLA SEKURUS™ DE 2 ML
KIT DE PIEZAS DE REPUESTO PARA INYECTORES
Contenido Kit: 1x Barril de 2 mL, 1x Guardaguñas perpendicular, 5x juntas tóricas
Compatible con: Inyector de montaje en botella Sekurus™ de 2 mL (página 1).



KIT DE PIEZAS DE REPUESTO PARA INYECTOR ALIMENTADO POR TUBO ACCURUS DE 12 ML
Contenido Kit: 1x Barril de 12 ml, 1x protector de aguja de auto-apriete, 5x juntas tóricas, 5x arandelas de fieltro
Compatible con: Inyector Accurus Tube Fed de 12 ml (Página 2).



KIT DE PIEZAS DE REPUESTO PARA INYECTOR ALIMENTADO POR TUBO ACCURUS DE 5 ML
Contenido Kit: 1x Barril de 12 ml, 1x protector de aguja de cierre automático, 5x juntas tóricas
Compatible con: Inyector de alimentación de tubo seleccionable hacia delante Accurus de 5 mL (Página 2).



SOPORTE PARA BOTELLA ACCURUS DE 6 ML
KIT DE PIEZAS DE RECAMBIO PARA INYECTOR
Contenido Kit: 1x depósito de 6 ml, 1x protector de aguja con autocierre, 5x juntas tóricas
Compatible con: Inyector Accurus para montaje en botella de 6 ml (Página 2).

REPETIDORES



KIT DE SERVICIO MENOR DEL REPETIDOR DE 25 ML
Contenido Kit: 5x juntas tóricas
Compatible con: Repetidores Pistol Grip y Ezi-Grip de 25 ml (Página 3).



KIT DE SERVICIO MENOR DEL REPETIDOR DE 50 ML
Kit Contents: 5x juntas tóricas
Compatible con: Repetidores Pistol Grip y Ezi-Grip de 50 ml (Página 3)



KIT DE SERVICIO PRINCIPAL PARA BARRIL DE POLIPROPILENO REPETIDOR DE 25 ML
Contenido Kit: 1x Barril de polipropileno de 25 mL con luer de aguja metálico, 1x junta tórica, 1x llave de cubo de aguja
Compatible con: Repetidores Pistol Grip y Ezi-Grip de 25 ml (Página 3).



REPETIDOR 25 ML POLISULFONA KIT DE MANTENIMIENTO MAYOR DEL BARRIL
Contenido Kit: 1x Barril de polisulfona de 25 mL con aguja metálica Luer, 1x junta tórica,
Compatible con: Repetidores Pistol Grip y Ezi-Grip de 25 ml (Página 3).




50 ML REPEATER BARRIL DE POLIPROPILENO KIT DE SERVICIO PRINCIPAL
Contenido Kit: 1x Barril de polipropileno de 50 mL con luer de aguja metálico, 1x junta tórica, 1x llave de cubo de aguja
Compatible con: Repetidores Pistol Grip y Ezi-Grip de 50 ml (Página 3).



REPETIDOR 50 ML POLISULFONA KIT DE SERVICIO PRINCIPAL PARA BARRIL
Contenido Kit: 1x Barril de polisulfona de 50 mL con aguja metálica Luer, 1x junta tórica,
Compatible con: Repetidores Pistol Grip y Ezi-Grip de 50 ml (Página 3).

INYECTORES ALIMENTADOS POR TUBO

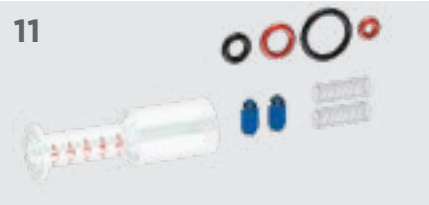

KIT PRINCIPAL DEL INYECTOR PARA AVES DE 0,5 ML
Contenido Kit: 1x Barril de 0,5 mL, 4x juntas tóricas, 2x válvulas y muelles
Compatible con: Inyector automático para aves de 0,5 ml (página 5).



KIT DE PIEZAS DE REPUESTO INYECTOR PREMIUM DE 2 ML
Contenido Kit: 1x Barril de 2 mL, 5x juntas tóricas
Compatible con: 2ml Inyector Premium Inyector alimentado por tubo (Página 6).



KIT DE SERVICIO PRINCIPAL PARA INYECTOR AUTOMÁTICO DE 2 ML ALIMENTADO POR TUBO Y BOTELLA
Contenido Kit: 1x Barril de 2 mL, 3x Válvulas y Muelles, 1 x Muelle de Retorno, 6x juntas tóricas
Compatible con: Inyector automático alimentado por tubo de 2 mL y de botella de 2 mL (páginas 5 y 7).



5 ML PREMIUM FORWARD SELECTABLE INYECTOR SPARE PARTS KIT
Contenido Kit: 1x Barril de 5 mL, 5x juntas tóricas
Compatible con: 5 mL Premium Inyector Seleccionable Alimentado por Tubo (Página 4).



KIT DE SERVICIO PRINCIPAL PARA INYECTOR AUTOMÁTICO ALIMENTADO POR TUBO DE 5 ML
Contenido Kit: 1x Barril de 5 mL, 1x Junta tórica, 5 arandelas
Compatible con: Inyector automático alimentado por tubo de 5 mL (Página 5).




KIT DE PIEZAS DE REPUESTO PARA INYECTORES DE ALTA VISCOSIDAD PREMIUM DE 12 ML
Contenido Kit: 1x Barril de 12 ml, 5x juntas tóricas, 5x arandelas de fieltro
Compatible con: Inyector de alta viscosidad alimentado por tubo Premium de 12 ml (página 6).

INYECTORES ALIMENTADOS POR BOTELLA



KIT DE SERVICIO PRINCIPAL INYECTOR AUTOMÁTICO DE 2 ML ALIMENTADO POR TUBO Y MONTADO EN BOTELLA
Contenido Kit: ver página 16.
Compatible con: Inyector automático alimentado por tubo de 2 mL e inyector automático montado en botella de 2 mL (páginas 5 y 7).

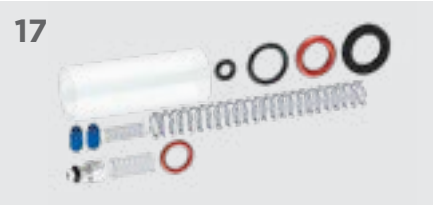

5 ML AUTOMATIC BOTTLE MOUNT INJECTOR MAJOR SERVICE KIT
Contenido Kit: 1x Barril de 5 mL, 1x Junta tórica, 5 arandelas
Compatible con: Inyector automático para montaje en botella de 5 mL (Página 7).



KIT DE PIEZAS DE REPUESTO PARA INYECTOR DE 0,5 ML DE MONTAJE EN FRASCO DE PRIMERA CALIDAD SELECCIONABLE HACIA DELANTE
Contenido Kit: 1x Barril seleccionable hacia delante de 0,5 mL, 5x juntas tóricas
Compatible con: Inyector seleccionable hacia delante de 0,5 ml de montaje en botella Premium (página 4).



KIT DE PIEZAS DE REPUESTO PARA INYECTOR DE 2 ML DE MONTAJE EN BOTELLA SELECCIONABLE HACIA DELANTE
Contenido Kit: 1x Barril de 2 mL, 1x protector de aguja con autoapriete, 5x juntas tóricas
Compatible with: Inyector Seleccionable de 2 mL con Montaje en Botella Premium hacia Delante (Página 4).



6 ML PREMIUM BOTTLE MOUNT INJECTOR SPARE PARTS KIT
Contenido Kit: 1x Depósito de 6 ml, 5x juntas tóricas
Compatible con: Inyector de montaje en botella Premium de 6 ml (página 7).



KIT DE PIEZAS DE REPUESTO DEL INYECTOR DE MONTAJE EN BOTELLA ULTIMATE BMV™ DE 2 ML
Kit Contents: 1x Barril de 2 mL, 1x Cubierta de 100 mL
Compatible con: Inyector de montaje en botella Ultimate BMV™ de 2 ml (página 8).




KIT DE PIEZAS DE REPUESTO DEL INYECTOR DE MONTAJE EN BOTELLA ULTIMATE BMV™ DE 6 ML
Contenido Kit: 1x Barril de 6 mL, 1x Cubierta de 100 mL
Compatible con: Inyector de montaje en botella Ultimate BMV™ de 6 ml (página 8).




KIT DE PIEZAS DE REPUESTO DEL INYECTOR DE MONTAJE EN BOTELLA BMV™ DE 0,5 ML
Contenido Kit: 1x Barril de 0,5 mL, 1x Cubierta de 100 mL
Compatible con: BMV™ Bottle Mount Injector de 0,5 ml (página 8).

DISPOSITIVOS MULTIFUNCIÓN

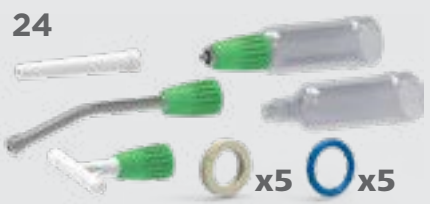

KIT DE PIEZAS DE RECAMBIO OPTIMISER™ DE 15 ML
Contenido Kit: 5x juntas tóricas, 5x arandelas de fieltro, 1x barril de 15 ml, 1x Inyector de 15 ml, 1x Boquilla metálica de 86 mm, 1x Boquilla recta de plástico de 57 mm, 1x Boquilla en forma de T
Compatible con: Kit Optimiser™ Multi de 15 ml (página 9).

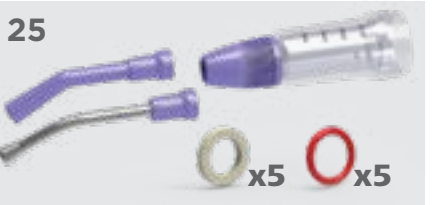

KIT DE RECAMBIOS 20ML APLICADOR TÓPICO Y APLICADOR ORAL
Contenido Kit: 1x Barril de 20 mL, 1x Boquilla Oral Metálica de 100 mm, 1x Boquilla Rosa Enroscada, 5x Juntas tóricas, 5x Arandelas de fieltro
Compatible con: Aplicador Oral y Aplicador Tópico de 20 ml (Página 9).



KIT DE RECAMBIOS 30ML APLICADOR TÓPICO Y APLICADOR ORAL
Contenido Kit: 1x Barril de 30 mL, 1x Boquilla Oral Metálica de 100 mm, 1x Boquilla Rosa Enroscada, 5x Juntas tóricas, 5x Arandelas de fieltro
Compatible con: Aplicador Oral y Aplicador Tópico de 30 ml (Página 9).

APLICADORES



KIT DE SERVICIO PRINCIPAL APLICADOR ORAL CORDERO 8 ML
Contenido Kit: 1x Barril de 8 ml, 2x Válvulas y Muelles, 1x Almohadilla de Palanca, 5x juntas tóricas, 2x arandelas
Compatible con: 8 ml de Aplicador oral de cordero (página 11).



KIT DE SERVICIO MENOR APLICADOR ORAL 20ML
Contenido Kit: 5x Juntas tóricas, 2x Válvulas y muelles, 1x Muelle de retorno, 1x Pistón, 1x Almohadilla de Palanca, 1x CirClip, 1x Lubricante, 1x Arandela Lubricante
Compatible with: Aplicador oral de 20 ml (página 11).



KIT DE SERVICIO PRINCIPAL APLICADOR ORAL DE 20 ML
Contenido Kit: 5x Juntas tóricas, 2x Válvulas y muelles, 1x Muelle de retorno, 1x Pistón, 1x Almohadilla de Palanca, 1x CirClip, 1x Lubricante, 1x Arandela Lubricante, 1x Cilindro, 1x Guía de la varilla de empuje
Compatible con: Aplicador Oral de 20 ml (página 11).




KIT DE SERVICIO PRINCIPAL APLICADOR ORAL 60 ML
Contenido Kit: 1x Barril de 60 ml, 2x Válvulas y Muelles, 1x Válvula de Entrada, 1x Cabezal de Pistón
Compatible con: Aplicador Oral de 60 ml (Página 11).

TIPOS DE SELECCIÓN DE DOSIS

FIJA


- (1) El dispositivo tiene una opción de dosis fija impresa en la ventana indicadora.
(2) El selector de dosis está presente en el dispositivo pero no se puede mover.

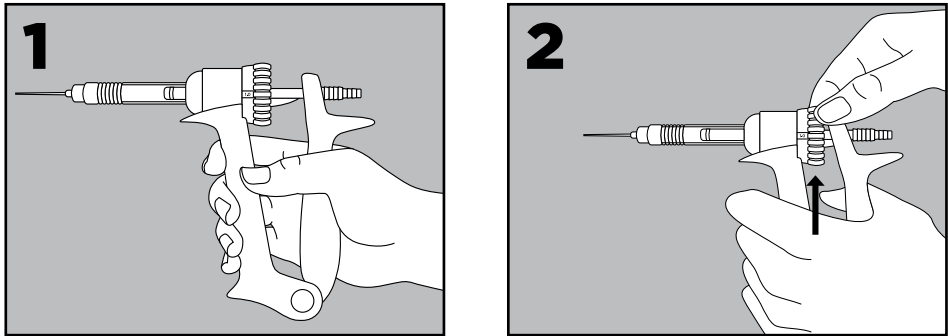

VARIABLE

El selector antideslizante permite una elección de dosis fácil y precisa, así como un ajuste flexible de la dosis. La selección de dosis variable puede ajustarse con precisión con la parte delantera del émbolo y las marcas de indicación de dosis del cilindro (a menos que se indique lo contrario en el dispositivo).


Para ajustar la dosis - Gire el selector de dosis en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario hasta que la parte delantera del émbolo esté ajustada a la dosis requerida indicada en el barril (Simcro (1 y 2).
Para NJ Phillips (excepto 60 mL Drencher): Suelte la contratuerca, enrosque el ajustador de dosis hasta que la parte delantera del émbolo se alinee con los incrementos de dosis del cilindro y, a continuación, vuelva a apretar la contratuerca (3).
Para empapador de 60 ml: Suelte la contratuerca, empuje los incrementos de la varilla para alinearlos con la guía de la varilla de empuje y, a continuación, vuelva a apretar la contratuerca.

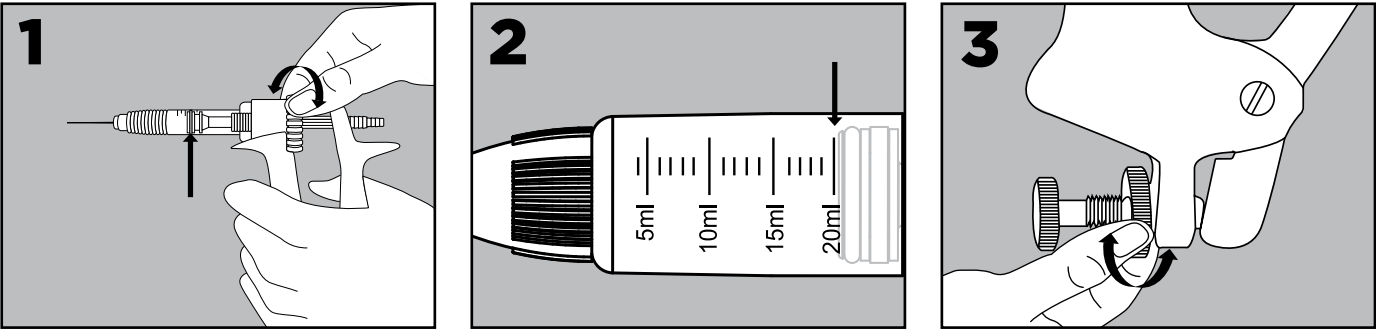

TUERCA DE BLOQUEO VARIABLE (NJ PHILLIPS)

El selector antideslizante permite una elección de dosis fácil y precisa, así como un ajuste flexible de la dosis. La selección de la dosis mediante el bloqueo de tuerca variable puede ajustarse con precisión mediante la parte delantera del émbolo y las marcas de indicación de dosis del cilindro (a menos que se indique lo contrario en el dispositivo).


Para ajustar la dosis - Gire el bloqueo de la tuerca en sentido antihorario (2) y, a continuación, gire el selector de dosis en sentido horario o antihorario hasta que la parte delantera del émbolo esté ajustada a la dosis requerida indicada en el cilindro (3). Gire la tuerca de bloqueo en el sentido de las agujas del reloj para fijar el ajuste de la dosis (4).

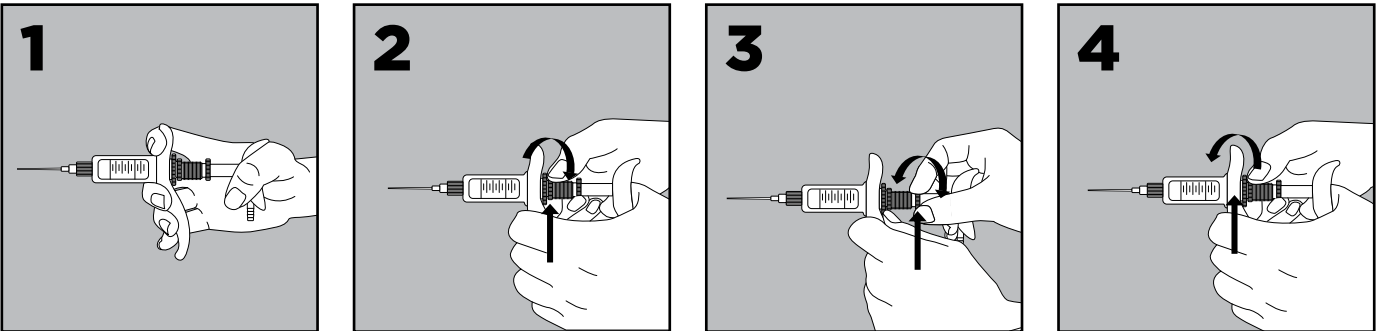

MARCHA ATRÁS SELECCIONABLE

El selector antideslizante permite elegir la dosis con facilidad y precisión, sin pérdida de producto al cambiar el ajuste de la dosis. La ventana indicadora muestra claramente el volumen de la dosis. Cuando se selecciona la dosis, el émbolo permanece en la parte posterior del cilindro.


Para ajustar la dosis - Gire el selector de dosis (1) en sentido horario o antihorario hasta que aparezca la dosis deseada en la ventana de dosis (2).

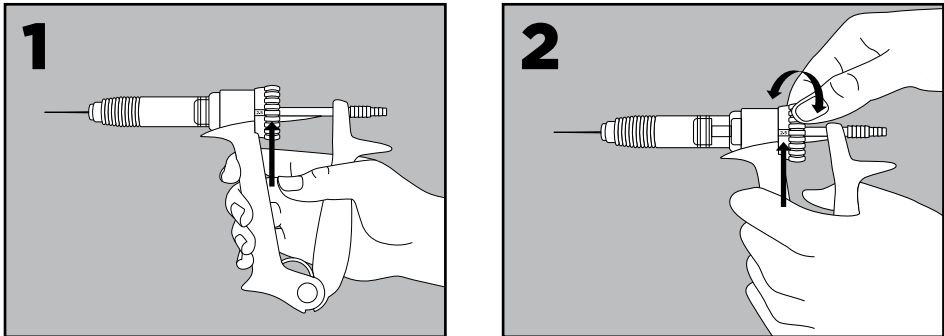

MARCHA ADELANTE SELECCIONABLE

El selector antideslizante permite elegir la dosis con facilidad y precisión al cambiar el ajuste de la dosis. Se puede evitar la pérdida de producto siempre que no se suelte el mango después de administrar la dosis anterior. La ventana indicadora muestra claramente el volumen de la dosis. Cuando se seleccionan tamaños de dosis más pequeños, el émbolo se desplaza más hacia delante a lo largo del cilindro.


Para ajustar la dosis - Comprima las asas del inyector (1). Para ajustar la dosis, gire el selector de dosis en sentido horario o antihorario hasta que aparezca la dosis deseada en la ventana de dosis (2). Una vez que aparezca la dosis deseada en la ventana de dosis, deje que las manijas del inyector se abran normalmente (3).

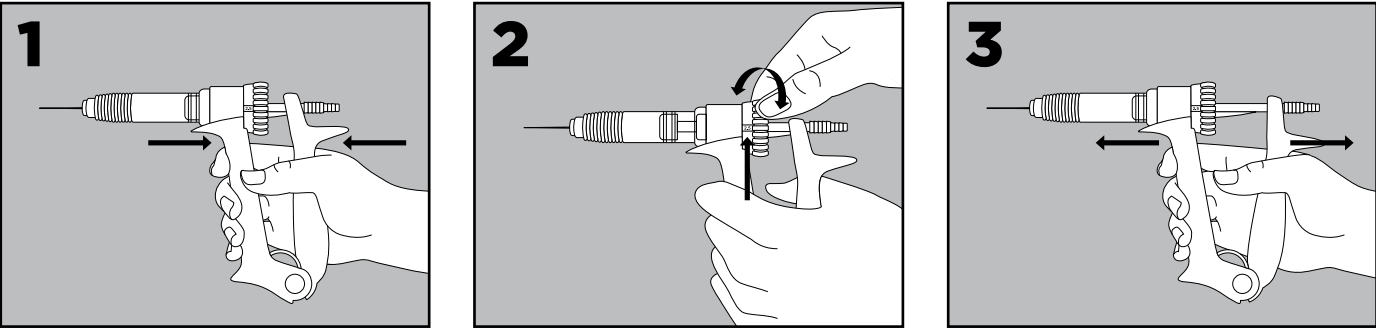

REPETIDORES

Los dispositivos tienen un dial que puede ajustarse a tamaños de dosis preestablecidos, el émbolo se mueve hacia el final del barril con cada dosis administrada, hasta que el barril se vacía, momento en el que el usuario rellena el barril.

Para ajustar la dosis - Pulse el botón situado en la parte superior del dispositivo; el muelle situado debajo del botón debe estar totalmente comprimido y, a continuación, tire del émbolo del cilindro hacia la parte posterior del cilindro (1). Gire el selector de dosis en sentido horario o antihorario (2) hasta que la dosis deseada esté alineada con la flecha situada en la parte superior del dispositivo (3).

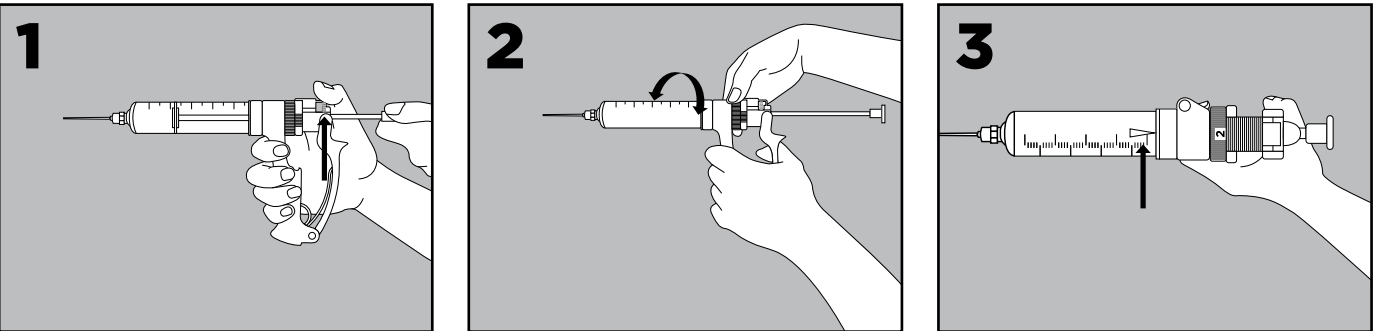

DATAMARS ***Livestock***TM

Datamars ESPAÑA

P.I Romica, Calle 1, parcela 200
02080 Albacete, España
Phone: +34 967 52 01 87
Whatsapp: +34 619 627 087
EMAIL: atencioncliente@datamars.com

www.livestock.datamars.es
www.simcro.com
www.njphillips.com

backed by
DATAMARS